

日歯生涯研修事業
「IC カード用研修受付ソフト」
インストール手順書
(NFC Port Software 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順.....	3
1. インストール前の確認事項.....	3
2. インストール手順の概略説明.....	4
3. 新規インストール.....	5
4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その1)	10
5. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その2)	11
6. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合	12

「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。
本インストール手順書は NFC Port Software 用 の手順書です。

1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等）」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows2000 Professional (ServicePack4 以降) ・ WindowsXP HomeEdition (ServicePack2 以降) ・ WindowsXP Professional (ServicePack2 以降) ・ Windows Vista Home Basic (X86) , 64bit ・ Windows Vista Home Premium Edition (X86) , 64bit ・ Windows Vista Business Edition (X86) , 64bit ・ Windows Vista Enterprise Edition (X86) , 64bit ・ Windows Vista Ultimate Edition (X86) , 64bit ・ Windows 7 Home Basic 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Home Premium 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Professional 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Enterprise 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Ultimate 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 8 32ビット (x86) , 64ビット (x64) ・ Windows 8 Pro 32ビット (x86) , 64ビット (x64) ・ Windows 8 Enterprise 32ビット (x86) , 64ビット (x64) <p style="text-align: center;">※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。</p>
言語	上記 OS の日本語
PC	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 <li style="padding-left: 20px;">※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。 ・ NEC PC-98 シリーズとその互換機については動作保証できません。 (※ 但し、動作することは確認しています。)
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

2. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は [IC カード用研修受付ソフト] のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行ってください。

3. 新規インストール

SETUP1.

当該のパソコンに NFC Port Software Version5.3.3.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。

既にインストールされている場合は、この画面は表示されません。




「はい」を選択して、NFC Port Software のインストールを開始して下さい。
「いいえ」を選択すると、セットアップは終了します。

SETUP2.

「はい」を選択すると、「NFC Port Software」(SONY 製品)のインストールが開始されます。
以下画面が表示されるので内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。

- ※ 「NFC Port Software」が既にインストールされている場合はその状態によって手順が異なります。
- ・「4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合」
 - ・「5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合」
- 該当する状態のページを参照して下さい。

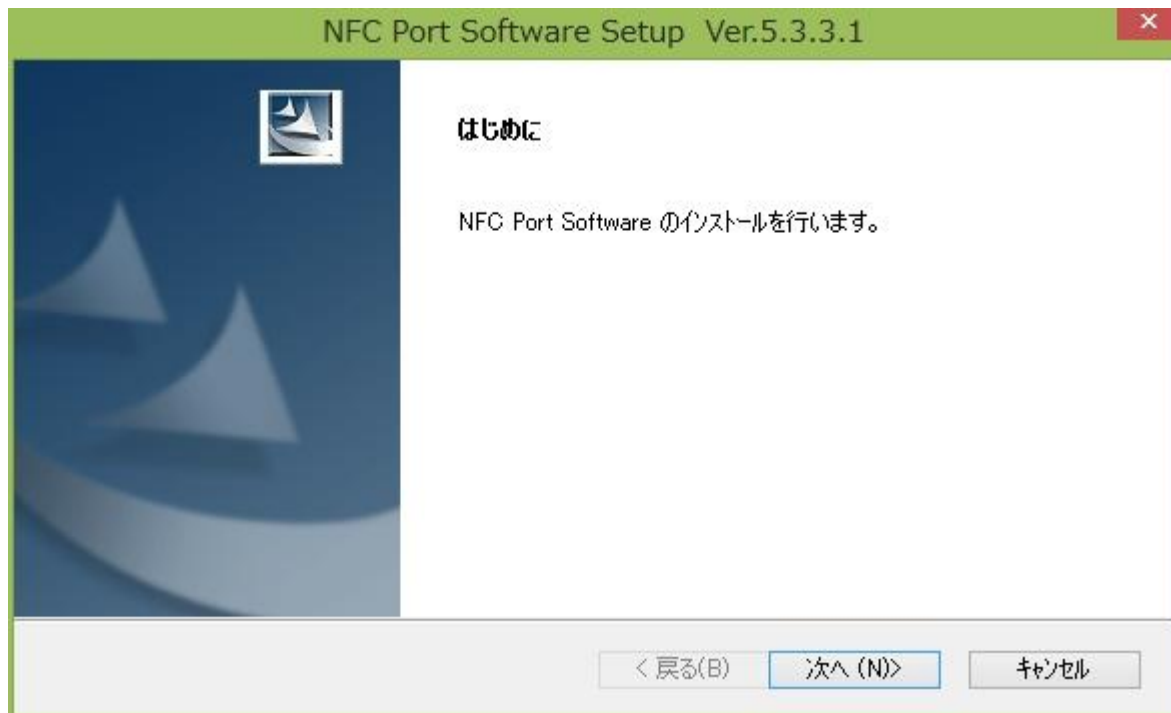

- ⚠ 「NFC Port Software」インストール画面が「IC カード用研修受付ソフト」インストール画面の背後に表示され、表示された画面が見えない場合があります。この場合はタスクバーより「NFC Port Software」を選択する事で前面に表示されます。



SETUP3.

使用許諾契約について表示されますので、内容をご確認の上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックします。



SETUP4.


FeliCa Secure Client のインストール先を設定します。インストールフォルダを変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。



⚠ ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先は変更しないでください。


SETUP5.

インストール先を確認します。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。

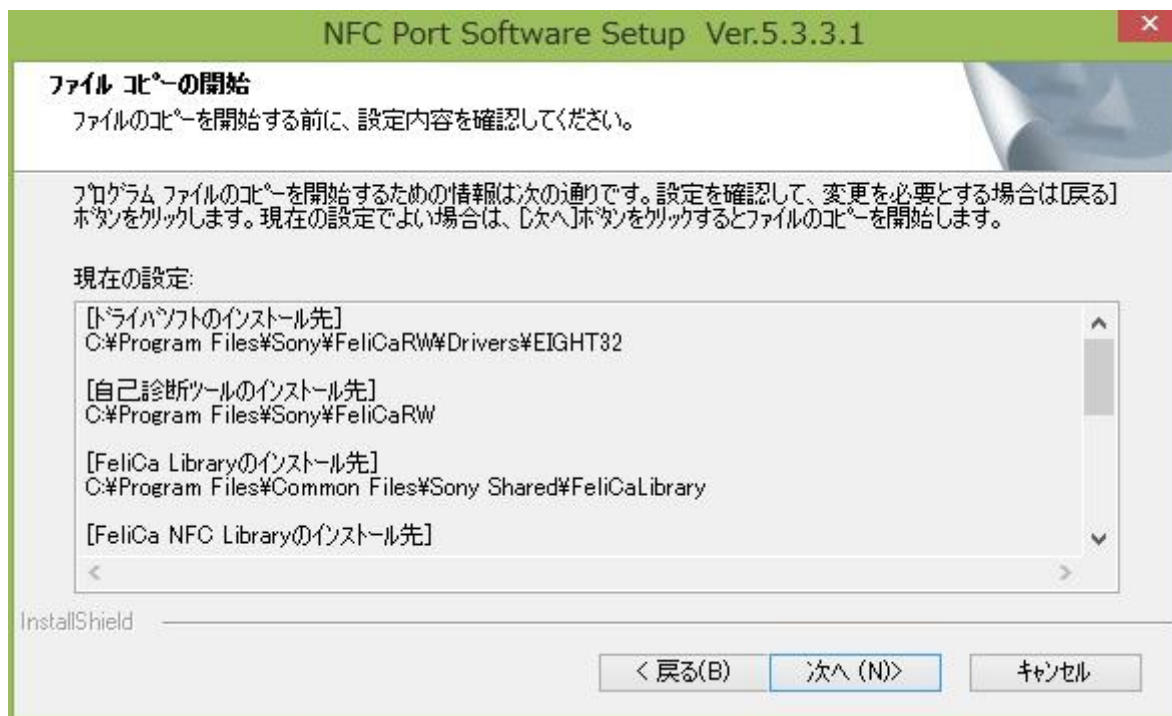

SETUP6.

「NFC Port Software」のインストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。

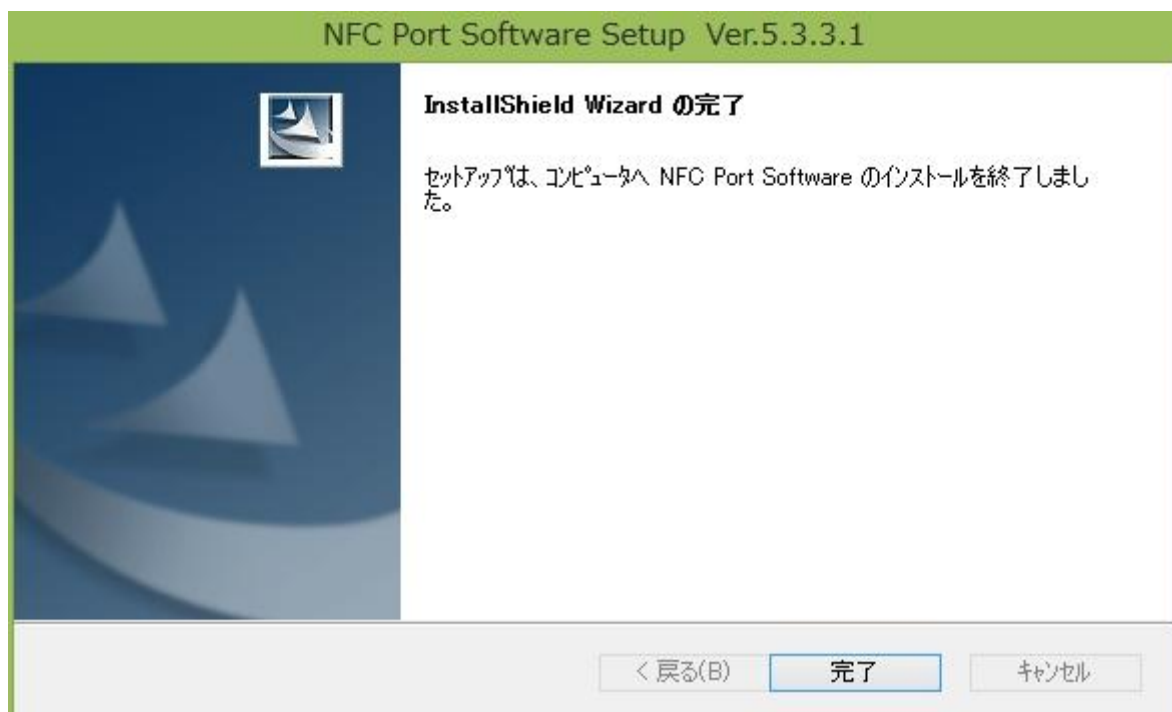

「完了」ボタンをクリックしますと、「NFC Port Software」のセットアップが終了します。これでインストールは終了です。


SETUP7.

再度「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その1)

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 4.1. Felica Port Software Version2.0 以上の古いプログラムが既にインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下のメッセージが表示されます。

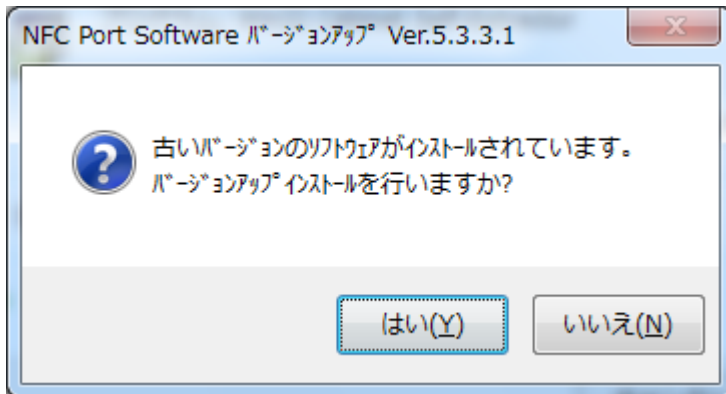

- 4.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。
- 4.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する SETUP9 の画面が表示されます。[SETUP1\(page5\)](#)より作業を継続して下さい。

5. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その2)

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 5.1. Felica Port Software Version2.0 未満の古いプログラムが既にインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下のメッセージが表示されます。




- 5.2. 「OK」ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを終了して下さい。バージョンアップが行えません。プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除してから、[SETUP1\(page5\)](#)に戻り、再度「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

6. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合

当該パソコンが FeliCa ポート内蔵 PC の場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 6.1. 当該パソコンに既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa ポートソフトウェアがインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下の 2 画面のいずれかが表示されます。
- 6.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。

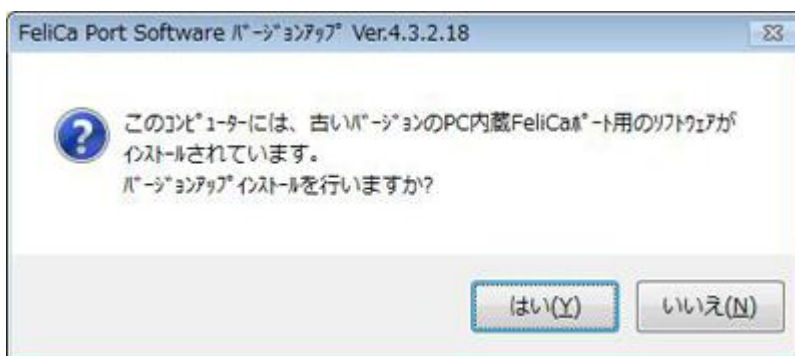

- 6.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する SETUP1 の画面が表示されます。[SETUP1\(page5\)](#)より作業を継続して下さい。

以上