

日歯生涯研修事業  
「IC カード用研修受付ソフト」  
インストール手順書  
(Windows 8 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 8 へのインストール手順.....	3
1. インストール前の確認事項.....	3
2. インストール手順の概略説明.....	4
3. 新規インストール.....	5
4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合.....	12
5. アプリケーションの削除方法.....	13

## 「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 8 へのインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。  
本インストール手順書は Windows 8 用 の手順書です。

### 1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等）」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。  
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Windows 8 32ビット (x86) , 64ビット (x64)</li> <li>・ Windows 8 Pro 32ビット (x86) , 64ビット (x64)</li> <li>・ Windows 8 Enterprise 32 ビット (x86) , 64 ビット (x64)</li> </ul> ※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。
言語	上記 OS の日本語
PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機</li> </ul> ※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

## 2. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は [IC カード用研修受付ソフト] のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行ってください。


### 3. 新規インストール

#### SETUP1.

**E-system** より、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール用ファイル  
 (「AttendSeminar\_Install\_Win8.EXE」)を取得し、そのファイルを当該コンピュータの任意のフォルダ  
 にコピーします。

**【以下に、「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要なファイルの、E-system からの取得方法を示します】**

- (1) **E-system** の「メニュー」から「IC カード用研修受付ソフト」をクリックします。

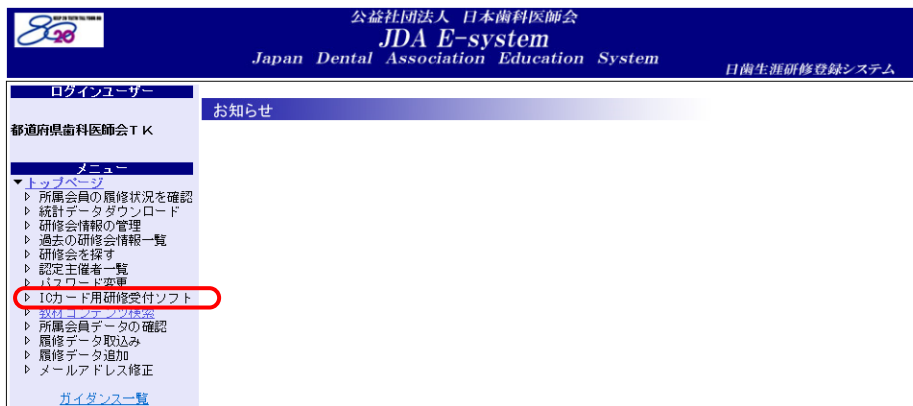


- (2) 「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要な、以下のファイルをダウンロードします。


- ① 「インストール手順書」
- ② 「プログラム」 ⇒ インストール用ファイル(AttendSeminar\_Install\_Win8.EXE)のことです
- ③ 「操作説明書」



- (3) 『「IC カード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム (Windows 8 用)』をクリックすると、以下の画面が表示されます。「保存」ボタンを押し、「名前を付けて保存」ボタンを押してください。

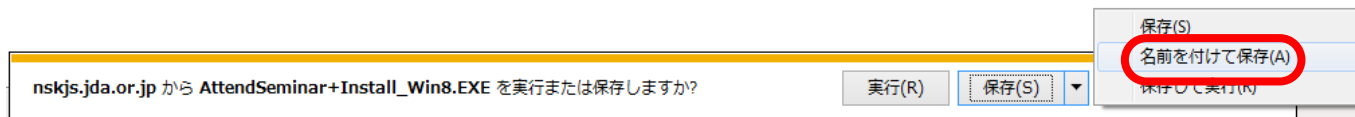

- (4) 上記画面の「保存」ボタンを押すと、下記画面が表示され、ファイルの保存場所をどこにするか聞いてきます。適切な保存場所を指定して下さい。その後、「保存」ボタンを押して下さい。

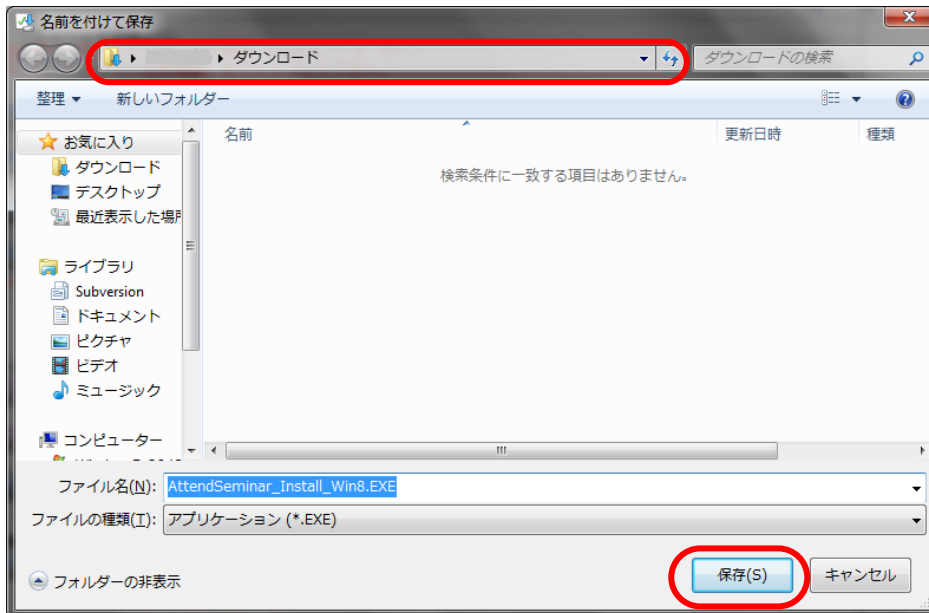

- (5) 指定した保存場所へ、ファイルの保存(ダウンロード)が始まります。



**【ご注意】**

プログラムのダウンロードには、時間（5～10 分）が掛かる場合があります。

※ダウンロード完了までの時間は、ご利用されるインターネットの接続環境に依存します。

- (6) ダウンロードが完了し、ファイルの取得が完了します。「フォルダーを開く」ボタンを押して下さい。




必要な「ファイル」を取得するコンピュータと、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールするコンピュータは、異なるコンピュータで構いません。

異なる場合は、「ファイル」をメモリスティック等を利用して、研修会場で使用するコンピュータにコピーしてご利用下さい。

## SETUP2.

「AttendSeminar\_Install\_Win8.EXE」ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。

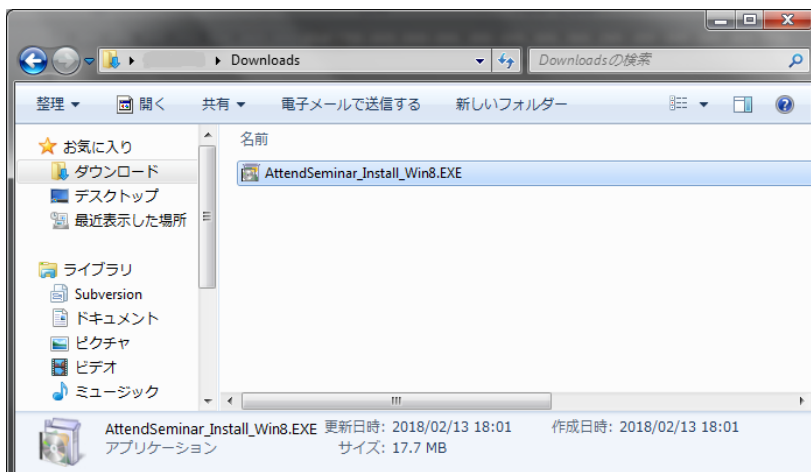

今回より基本的にインストーラを「2回」動かしてインストールが完了するようになりました。


- 1回目：「NFC Port Software」のインストール
- 2回目：「IC カード用研修受付ソフト」のインストール

## SETUP3.

次のメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された場合は

「AttendSeminar\_Install\_Win8.EXE」と表示されていることを確認し、「はい」ボタンをクリックして下さい。


「AttendSeminar\_Install\_Win8.EXE」以外の表示がなされている場合は、「いいえ」ボタンをクリックして下さい。

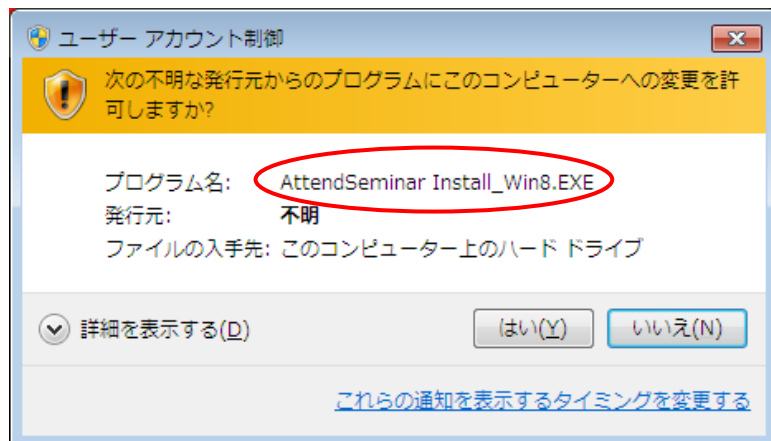

## SETUP4.


当該のパソコンに NFC Port Software Version5.3.3.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。

「NEC Port Software 用 インストール手順書」を参考にインストールを行ってください。  
既にインストールされている場合は、この画面は表示されませんので **SETUP5(page8)**に進んで下さい。

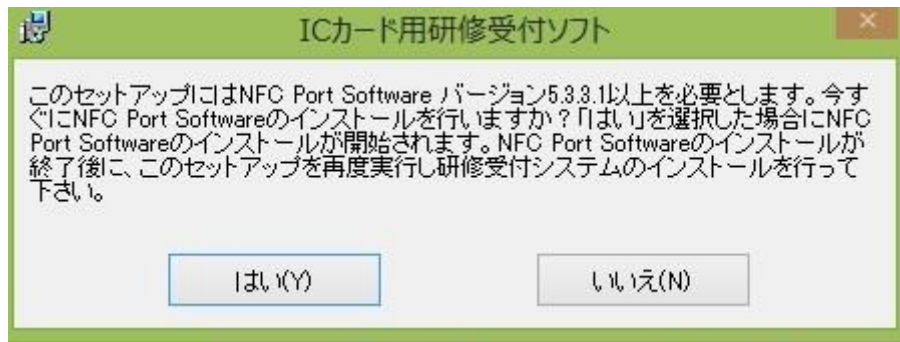

## SETUP5.

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールが開始されます。「次へ」ボタンをクリックします。

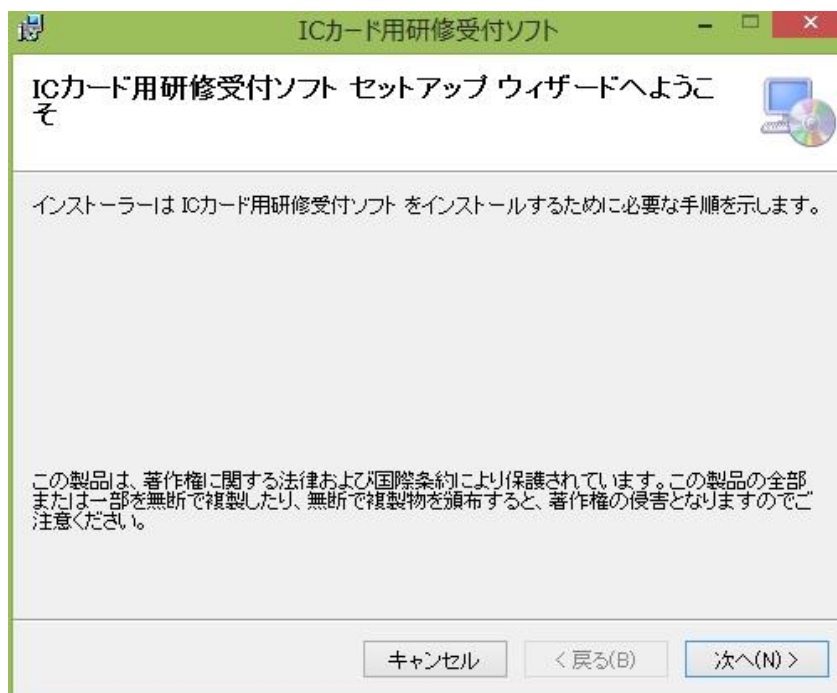


「ボリューム C: は現在利用できません。別のボリュームを選択してください」とメッセージが表示され、インストールが終了する場合があります。この場合は、SETUP2 から再度作業を行ってください。



## SETUP6.

インストール先を設定します。問題がないかぎり、インストール先は変更しないようにして下さい。ディスクの空き容量等の問題でインストール先を変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択して下さい。

インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

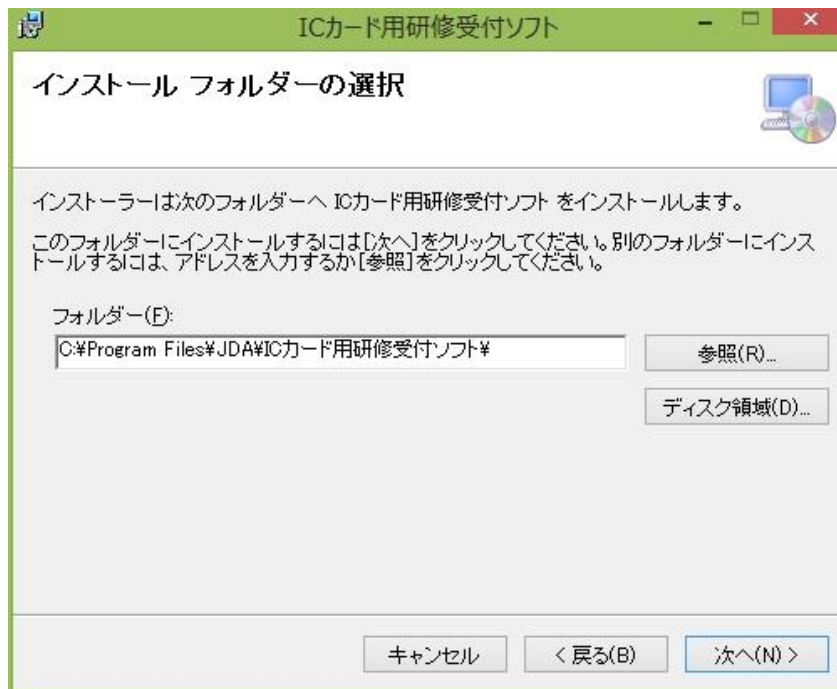


---

**⚠** ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先を変更しないでください。

---


## SETUP7.

インストール開始の確認画面が表示されます。問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

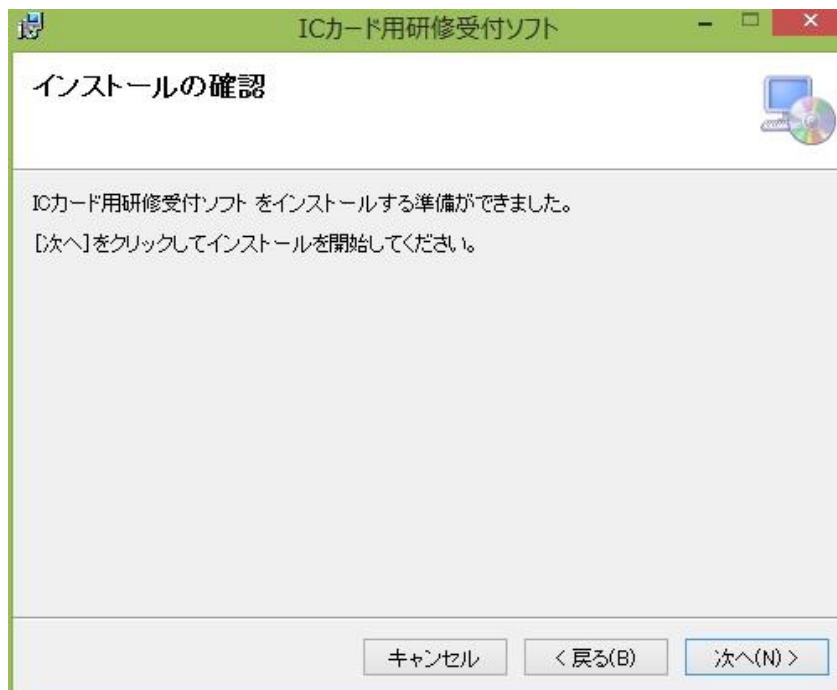


## SETUP8.

インストールが開始されます。  
インストールが終了するまで、しばらくお待ち下さい。

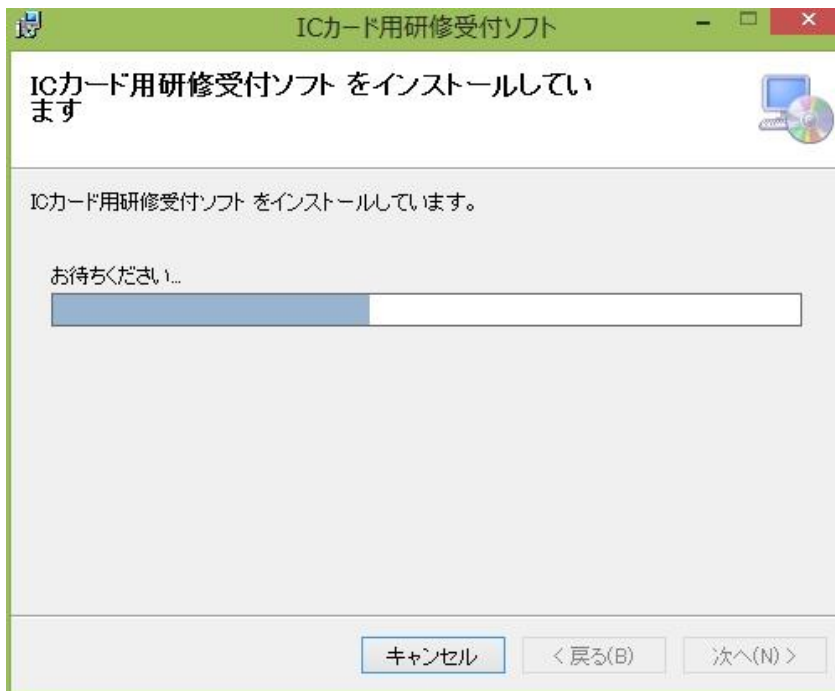

## SETUP9.

全てのコンポーネント/ドライバ/アプリケーションのインストール完了を通知する画面が表示されます。  
「閉じる」ボタンをクリックします。

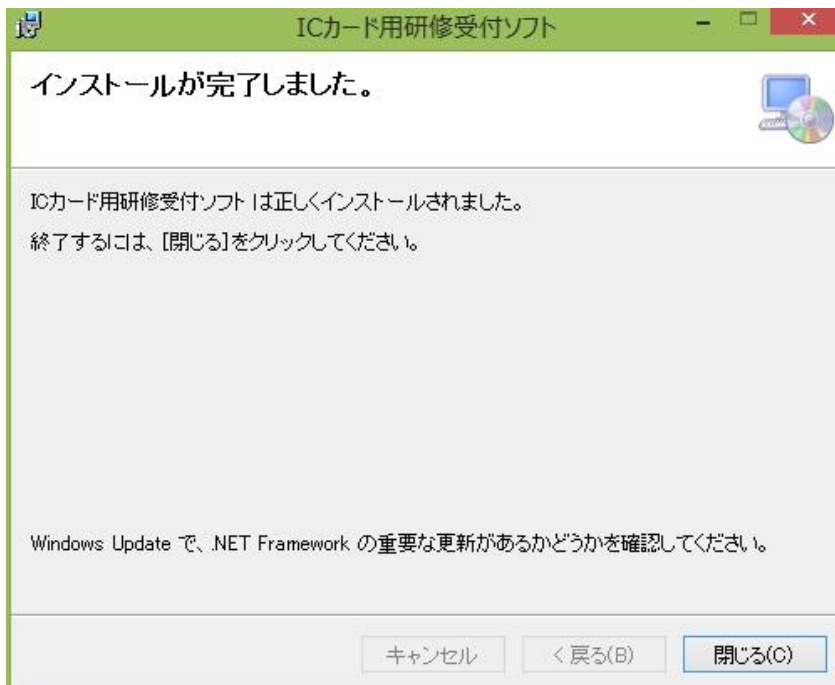

#### SETUP10.

インストール完了後に、FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) を USB に接続します。ドライバが自動的に認識されます。



インストール後「C:¥JDASETUP」フォルダが残りますが、削除しても問題ありません。

---

SETUP10 を終了して、これでインストールは終了です。

#### 4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合


既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合、次のメッセージが表示されます。

「IC カード用研修受付ソフトの修復」または「IC カード用研修受付ソフトの削除」から作業を選択し（通常は「修復」を選択）、「完了」ボタンをクリックします。その後は画面の指示に従い操作を行って下さい。




## 5. アプリケーションの削除方法


- 5.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
- 5.2. Windows の [スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、次に [コントロールパネル] をクリックして下の画面を表示します。

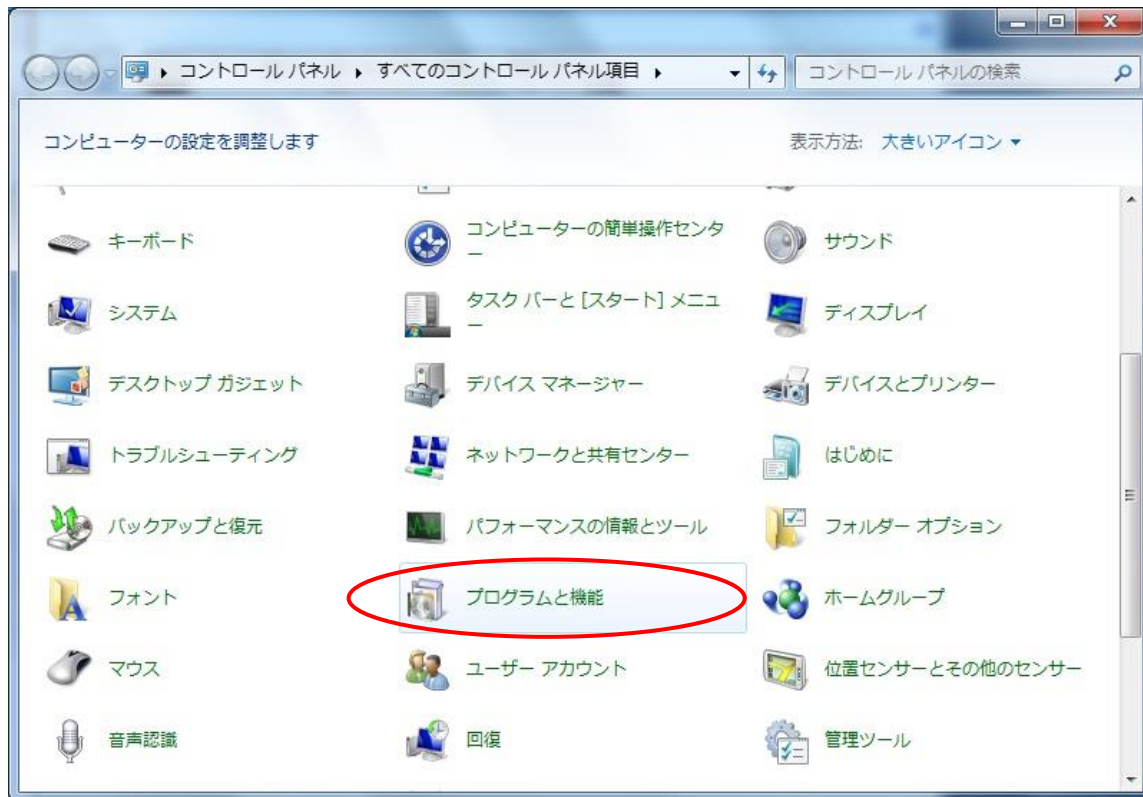


- 5.3. [プログラムと機能] をクリックします。
- 5.4. 表示されるプログラムの一覧から削除するプログラム（「FeliCa Port Software」または「IC カード用研修受付ソフト」）をクリックして選択します。
- 5.5. [アンインストール] ボタンをクリックします。

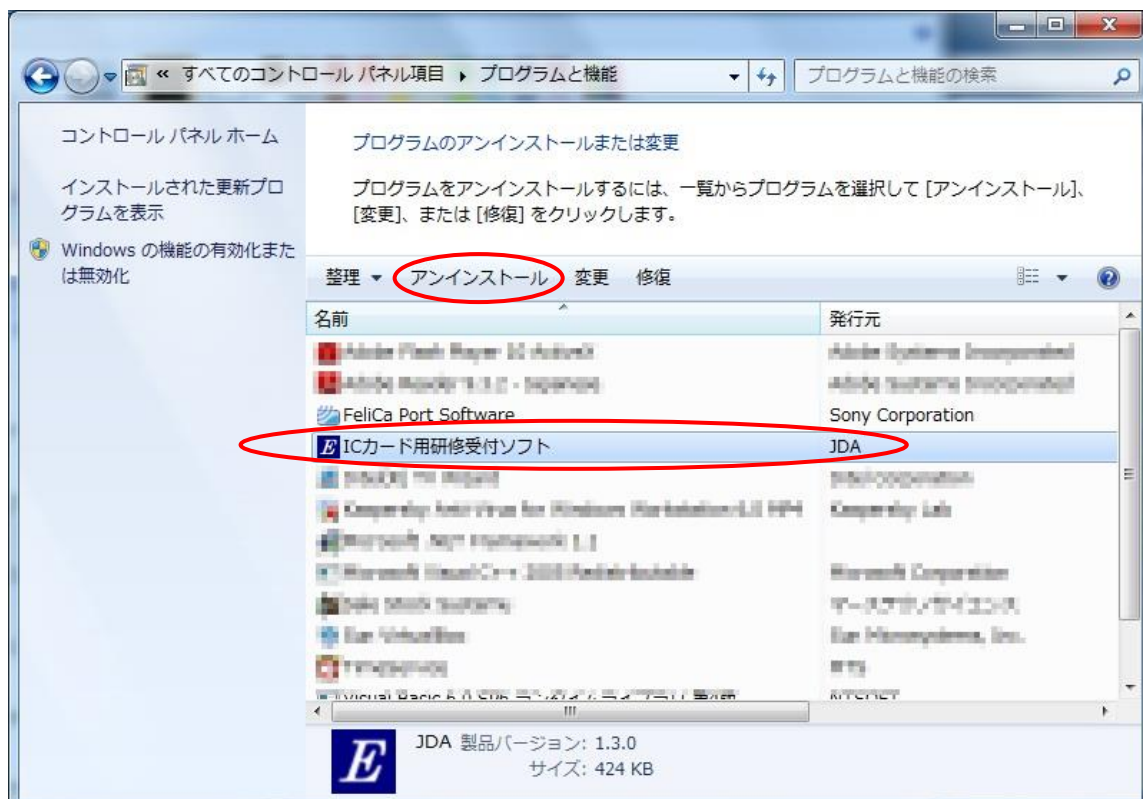

- 5.6. 削除の確認メッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。

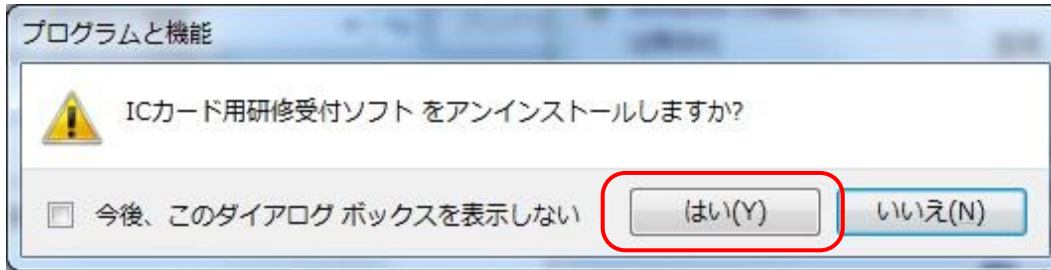

- 5.7. 次のメッセージが表示される場合があります。表示された場合は「はい」 ボタンをクリックします。

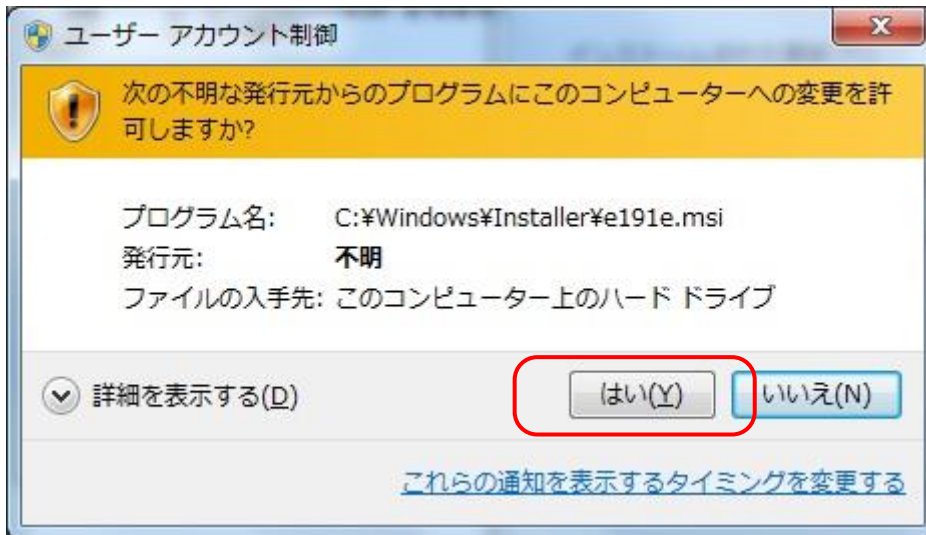

- 5.8. 削除の完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックして、終了します。



「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。  
不要な場合は、プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除して下さい。

以上